



Scavo Indiko Plus
Sistema per Chimica Clinica e Test Speciali



La soluzione ideale
per operare in eccellenza



DASITGROUP



DASIT
DIAGNOSTICA



Risultati certi

senza compromessi

- Sistema "sample oriented"
- Applicazioni ampiamente validate e tracciabili a metodi e materiali di riferimento internazionali.
- Ampia gamma di reagenti ottimizzati.
- Conforme alle direttive IVD
- Completamente automatico
- Semplice da usare



Sclavo Indiko Plus è un sistema analitico da banco completamente automatico ad accesso random per il dosaggio di test di chimica clinica e test speciali. Analizzatore, reagenti e consumabile costituiscono un sistema completo ed affidabile per la routine quotidiana. Le innovative soluzioni adottate consentono di eseguire le analisi con semplicità e in completo automatismo. Cadenza analitica di 350 test/ora.

Completa automazione

massima ottimizzazione

La tecnologia con celle di reazione monouso permette l'analisi simultanea di test diversi su uno stesso campione e l'analisi contemporanea di diversi tipi di campioni. Il caricamento continuo di campioni, cellette e reagenti agevola le operazioni di routine. Sistema *sample oriented* per una refertazione rapida dei risultati.

- Start-up rapido e manutenzione giornaliera veloce.
- Celle di reazione monouso per una maggiore sicurezza del dato analitico esente da fenomeni di carry over.
- La versatilità operativa snellisce le attività di gestione dei campioni.
- La funzione reflex test ottimizza i tempi di lavoro generando automaticamente l'esame d'approfondimento da eseguire.
- L'affidabilità analitica è monitorata con un programma di QC in real time.
- L'aggiornamento automatico di calibratori e controlli riduce la possibilità di errori e l'impegno dell'operatore.
- Completa tracciabilità del dato associato alla calibrazione e al lotto del reagente.



Semplicità di gestione

del campione e del reagente



Disco campione da 54 posizioni: 6 rack da 9 posizioni. E' possibile caricare simultaneamente qualsiasi combinazione di coppette porta campioni e provette primarie.



Disco reagenti da 42 posizioni. Il consumo e la scadenza dei reagenti è verificata in tempo reale.




Caricatore celledette da 360 celle di reazione. L'impiego di bassi volumi di reazione e di acqua distillata assicura un ridotto impatto ambientale.



Incubatore termostato da 90 posizioni. Le celledette monouso non richiedendo lavaggi evitano il carry over.



Le dimensioni ridotte e l'assenza di allacciamenti idrici permettono una rapida e facile installazione.

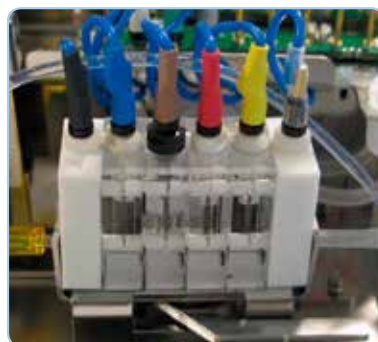

Il modulo ISE consente il dosaggio di cloro, sodio e potassio in potenziometria diretta.



Prestazioni standardizzate

con reagenti Sclavo Diagnostics Int.

L'impiego di reagenti con codice a barre e pronti all'uso riduce la probabilità di errore e ottimizza i tempi di lavoro. L'originale design delle cellette di reazione garantisce un consumo ridotto dei reagenti. Un packaging appositamente concepito per il sistema analitico evita inutili sprechi di prodotto. I metodi Sclavo Diagnostics International sono tracciabili a materiali e protocolli di riferimento internazionali.



Sicurezza e semplicità d'uso

nella routine giornaliera



Sclavo Indiko Plus

Cadenza analitica di 350 test/ora fotometrici e 135 test/ora di ISE

Possibilità di caricare fino a 54 campioni simultaneamente

Piatto reagenti da 42 posizioni refrigerato

Caricamento continuo dei campioni, dei reagenti e delle cellette di reazione

Tracciabilità completa dei risultati

Collegamento bidirezionale a LIS

Consumo idrico: 2,5 litri/ora. Non sono necessari allacciamenti idrici

Dimensioni dell'analizzatore: larghezza 94 cm, profondità 70 cm, altezza 62 cm

Altezza con coperchio aperto: 130 cm

Dasit Diagnostica/CH, C.I. INDIKOPLUS. BROCHURE/2014/01 - In this brochure all pictures and specifications are purely indicative and may vary without notice