

**EMATOLOGIA**  
**VALORE CLINICO IN OGNI**  
**SOLUZIONE ANALITICA**



**DASIT**  
DIAGNOSTICA

# **PARTNER NELLE SCELTE**

**NELLA MEDICINA  
DI LABORATORIO**

**D**

asit è protagonista della diagnostica in vitro e partner privilegiato dai professionisti di laboratorio.

Offriamo prodotti selezionati nel panorama mondiale e servizi di eccellenza nelle principali aree diagnostiche.

Siamo quotidianamente al vostro fianco per capire le vostre esigenze, consigliarvi nella scelta della migliore soluzione tecnico-organizzativa e accompagnarvi durante la realizzazione del vostro progetto.

**Competenza, esperienza, passione:** questo guida il nostro operato da oltre 30 anni.

# EMATOLOGIA

**VALORE CLINICO IN OGNI  
SOLUZIONE ANALITICA**



Dasit Diagnostica da oltre 30 anni ha scelto Sysmex, azienda leader mondiale nel settore ematologico, come partner tecnologico.

Affidabilità, robustezza, innovazione tecnologica applicata alla diagnostica ematologica: fattori che si traducono in soluzioni analitiche ed organizzative che guardano sempre verso il futuro.

Dasit Diagnostica è in grado di soddisfare le esigenze e la richiesta di qualità di ogni professionista di medicina di laboratorio.

# DASIT DIAGNOSTICA

## EMATOLOGIA

### SYSMEX DI-60

- Il vetrino preparato dal modulo SP-10 viene letto dal sistema DI-60 senza alcun intervento da parte dell'operatore
- La classificazione delle cellule viene sottoposta all'operatore per revisione e il dato confermato viene integrato all'interno del referto
- Disponibile anche in modalità stand alone

### SYSMEX SP-10

- Lo striscio viene eseguito in funzione del valore di ematocrito del paziente a garanzia della qualità del risultato
- La colorazione può essere personalizzata in base alle esigenze dello specialista di laboratorio
- Disponibile anche in modalità stand alone

**ESCLUSIVO SISTEMA PER LA  
LETTURA AUTOMATIZZATA  
DEL VETRINO EMATOLOGICO  
E CLASSIFICAZIONE DELLE  
CELLULE EMATICHE**

**STRISCIO E COLORAZIONE  
IN COMPLETA  
AUTOMAZIONE**



**Sistemi Sysmex XN:** sino a 9 analizzatori per una produttività massima di 900 test/ora, liberamente configurabili con le APP dedicate all'approfondimento diagnostico per rispondere alle esigenze del laboratorio e della clinica.

**SYSMEX  
XN**

**SYSMEX  
XN-9000**

**L'EMATOLOGIA DI DOMANI,  
ADESSO**

- Indirizzamento del rack verso l'analizzatore dedicato ai test di screening o all'approfondimento
- Esecuzione di re-run o reflex-test in completa automazione senza l'intervento dell'operatore

**DA OLTRE 20 ANNI  
L'AUTOMAZIONE IN EMATOLOGIA**



# VALORE CLINICO

La citometria a flusso in fluorescenza è il cuore della tecnologia Sysmex che coniuga affidabilità, accuratezza e precisione. Il valore clinico dei parametri refertati è ampiamente documentato in letteratura e consente al professionista di medicina di laboratorio di supportare il clinico nelle decisioni terapeutiche.

Ogni modulo analitico della famiglia XN esegue la determinazione di Granulociti Immaturi ed Eritroblasti su ogni campione a completamento dell'emocromo.



In base alle necessità clinico-diagnostiche del laboratorio, i sistemi XN possono essere ulteriormente integrati con APP specifiche di approfondimento:

- Determinazione della presenza di reticolociti nelle varie fasi maturative per la valutazione dell'attività eritropoietica midollare
- Determinazione del parametro IPF (piastrine immature) per la valutazione della piastrinopoiesi midollare e la diagnosi differenziale delle piastrinopenie
- Gold standard dell'analisi dei liquidi biologici in completa automazione, senza pretrattamento del campione



SYSMEX  
XN



# UNA SOLUZIONE PER OGNI NECESSITÀ DEL LABORATORIO

Dal grande al piccolo laboratorio,  
Dasit Diagnostica ha una soluzione  
dedicata all'ematologia di qualità.



SYSMEX  
XS-1000

**E**ccellente capacità analitica in un sistema compatto e con minimo volume di aspirazione

- Sino a 60 emocromi/ora con formula a 5 popolazioni
- Volume di aspirazione di soli 20 µl adatto a campioni pediatrici o scarsi in volume



SYSMEX  
XP-300

**R**obustezza e affidabilità con il minimo ingombro

- Refertazione in tempo reale di 20 parametri inclusa la conta dei neutrofilii
- Monitor LCD touchscreen a colori e lettore barcode per la massima semplicità d'uso



COLORATORE  
RAL

**L**a soluzione definitiva per la colorazione del vetrino ematologico:


- Sistema semiautomatico di colorazione
- Coloranti methanol-free per la massima sicurezza degli operatori
- Massima produttività e flessibilità: colorazione contemporanea da 1 a 20 vetrini
- Ideale anche come soluzione di backup

**DASIT DIAGNOSTICA  
È DA SEMPRE VICINA  
ALLE ESIGENZE  
DEI PROPRI  
UTILIZZATORI CON  
PRODOTTI E SERVIZI  
DI ECCELLENZA.**

**Pronto Dasit:** punto di accesso per gli utilizzatori di strumentazione Dasit al servizio di assistenza tecnica e specialistica.

**Supporto Specialistico Territoriale:** ogni giorno a fianco dell'utilizzatore nella gestione e personalizzazione della strumentazione.

**Formazione:** Directa è l'impegno tangibile di Dasit nella formazione e aggiornamento del professionista di laboratorio. Percorsi di approfondimento dedicati permettono una visione a tutto tondo degli aspetti tecnici e clinici dell'attività di laboratorio.

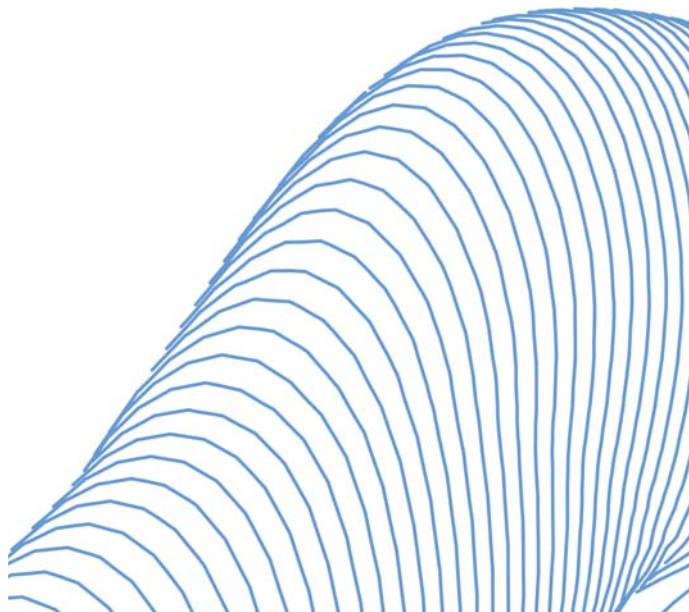

**DASIT S.P.A.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20010 CORNAREDO (MI)  
TEL. 02 93 991 1  
FAX 02 93 991 390  
[www.dasitdiagnostica.it](http://www.dasitdiagnostica.it)